

## VLabs 3DX 犬下痢三合一快篩試劑

- Canine Parvovirus Antigen
- Canine Coronavirus Antigen
- Giardia Antigen

Combo Test



由台灣百衛生物科技所研發生產的 Bioguard VLabs 3DX 犬下痢三合一快篩試劑，利用的檢測原理為免疫層析技術，可快速定性檢測出犬糞便中的犬小病毒抗原/犬冠狀病毒抗原/梨形鞭毛蟲抗原。快篩試劑板上的檢測區包含檢測(T)線和對照(C)線。將反應溶液注入檢體槽時，溶液會側向流入檢測區，當檢體中含有足夠的犬小病毒/犬冠狀病毒/梨形鞭毛蟲抗原時，會被快篩試劑中高度專一性的單株抗體所辨識，進而形成抗原抗體複合物並使T線呈現紅色。

### 包裝規格：


內容物	每盒5組	每盒10組
檢測試片	5	10
滴管	5	10
稀釋液	5	10
無菌採樣棉棒	5	10
產品說明書	1	1

**適用檢體：**犬隻糞便。

### 操作步驟：

- 取出快篩試劑片鋁袋、稀釋管和無菌採樣棉棒。沿鋁袋切口
- 撕開，取出試劑片，靜置於乾淨且水平的桌面上。
- 取出無菌採樣棉棒，用棉棒沾取適量新鮮糞便（如圖示）。
- 請依下圖圖示採集，過多的樣本可能會造成偽陽性及流速緩慢。
- 旋開稀釋管瓶蓋，將沾有檢體的棉棒浸入稀釋管內，充分攪
- 拌混勻後靜置1分鐘。
- 取出滴管，用滴管吸取稀釋管內的上清液作為檢測液（注意
- 不要吸到下方的沉澱物，以免造成試紙阻塞）。
- 用吸有檢測液的滴管，向試劑片的檢體槽各滴入5滴(100μL)
- 不含氣泡的檢測液。使用後的滴管即丟棄，且需按照本國生物醫療廢棄物處理辦法之規定。
- 靜待5-10分鐘\*後讀取檢測結果。


\*滴入檢體後請於5-10分鐘內觀察顯示之結果。放置時間過長，可能會因檢測液回流後非特异性結合的原因而使結果出現偽陽性。

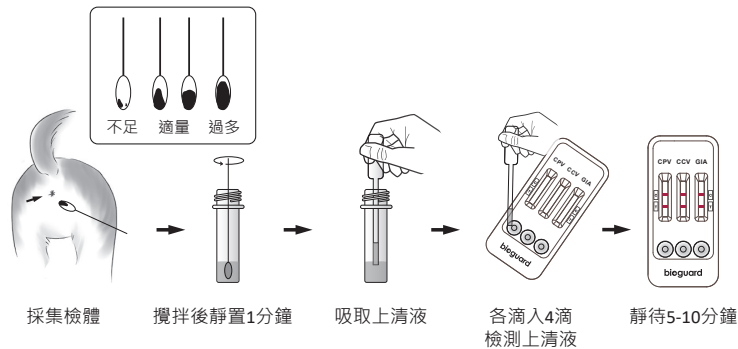

### 結果判讀：

- 1) 陽性：C線與T線均呈現紅色（不論顏色深淺）。
- 2) 陰性：C線呈現紅色，T線不顯色。
- 3) 無效：C線不顯色，無論T線是否顯色。

\*產品過期、保存不當、產品瑕疵或操作不當皆有可能造成無效的檢測結果，應使用新的試劑片重新操作。

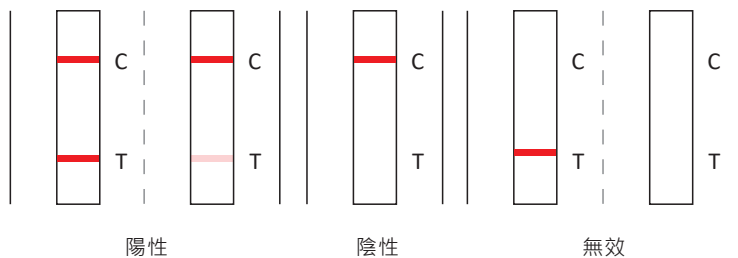

### 儲存條件：

- 快篩試劑請存放在2-30°C的環境下，勿存放在冷凍庫，如存放於冷藏(2-8°C)，使用前請於室溫回溫15-30分鐘後再使用。
- 避免存放在日光直接照射處。
- 快篩試劑有效期限為出廠後24個月。

### 注意事項：

- 請遵照本使用說明操作，未按照正常使用流程操作可能會造成檢測結果的誤差。
- 使用前請注意保存期限，請勿使用超過保存期限的快篩試劑。
- 試片開封後請在10分鐘內使用完畢，以免暴露在空氣的時間過長，造成快篩試劑受潮，而影響到產品的穩定性。
- 本產品，包括快篩試劑片、稀釋管和滴管皆為一次性產品，請勿重複使用，使用完畢後，請依照本國生物醫療廢棄物處理之規範丟棄。
- 剛滴入檢測液或稀釋液時，請勿移動檢測試片，以免造成檢測異常。
- 請使用產品內附的稀釋液，勿混用其他或不同批次產品的稀釋液。

### 測試限制：

本快速檢測試劑為獸醫師專用的體外快速診斷工具，僅供定性檢測結果的參考，無法完全排除任何可能原因所造成的偽陽性和偽陰性。除了快篩的檢測結果外，醫師應綜合動物的臨床症狀或其它實驗室檢測方法的結果後才可確診。